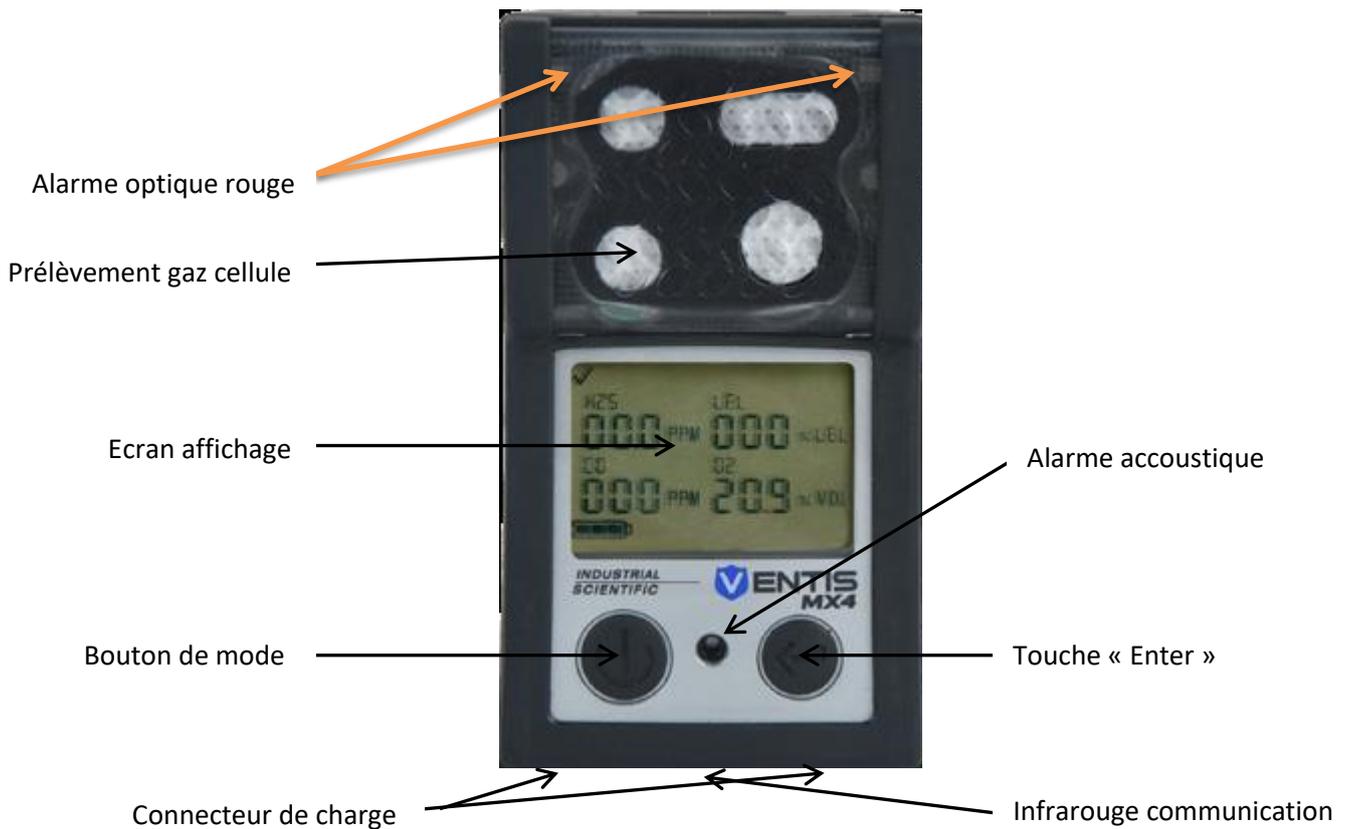


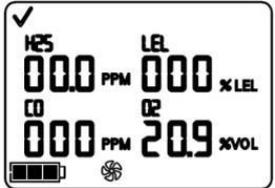
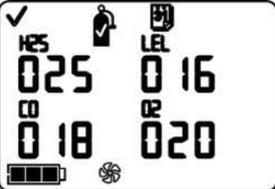
MX4 Ventis



Enclenchement:	Appuyez sur le bouton de mode jusqu'au déclenchement des alarmes optiques rouge. Le démarrage de l'appareil prend 30 secondes, information de la date de la dernière calibration s'affiche sur l'écran. Dès le démarrage complet de l'appareil, un signal sonore retentit.
Déclenchement:	Appuyez sur le bouton de mode durant 5 secondes. Un décompte apparait à l'écran ainsi que 5 signaux sonores. Attendre la fin du compte.
Menu Tournant:	Appuyez sur le bouton de mode (mode mesure – nombres de jours depuis la dernière calibration – calibration oxygène – derniers pics de mesures – VME – VLE– mode mesure)
Eclairage écran:	En appuyez sur l'un des 2 boutons, s'allume environ 15 secondes.
Niveau d'alarme:	Sont préprogrammées selon les normes, en vigueur, de la SUVA , ne peuvent être modifiées
Alarme:	<p>Éteindre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - suite à une alarme LIE, appuyez 5 sec. sur la touche  - LIE «OR» (Over range) dé/enclenchez le Ventis Pro - VME (valeur moyenne d'exposition / 8std) sur l'affichage VME « effacer » - VLE (valeur limite d'exposition / 15 Min) sur l'affichage VLE « effacer »

Menu tournant

(bouton mode )

	<p>Mode mesure : Affiche la mesure actuelle en direct.</p> <p>Prochain menu, appuyez la touche  *</p>
	<p>Page calibration : Sur l'écran apparait une bouteille de calibration et un symbole de calendrier. Le nombre de jours depuis la dernière calibration est indiqué pour chaque cellule séparément.</p> <p>Prochain menu, appuyez la touche  *</p>
	<p>Calibration point zéro : En validant avec la touche «enter», vous calibrez la cellule d'oxygène (O2) à 20.9% et effectuez la mise à zéro des autres cellules (sauf CO2).</p> <p>Important: seulement en extérieur dans un environnement Neutre, sans gaz.</p> <p>Prochain menu, appuyez la touche  *</p>
	<p>Valeurs de pointe : Cet affichage informe sur les dernières valeurs de pointe mesurées (affichage O2 = valeur la plus basse). Les valeurs sont supprimées à l'aide de la touche Entrée.</p> <p>Prochain menu, appuyez la touche  *</p>
	<p>Concentration maximale sur le lieu de travail : VME des capteurs toxiques des 8 dernières heures. Les valeurs sont supprimées à l'aide de la touche Entrée.</p> <p>Prochain menu, appuyez la touche  *</p>
	<p>Limite à court terme : VLE des capteurs toxiques des 15 dernières minutes. Les valeurs sont supprimées à l'aide de la touche Entrée</p> <p>Retour au menu de mesure, appuyez la touche  *</p>

* Après 30 secondes, le système revient automatiquement à la page principale.